



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية الطب - الخدمات الطبية
لجنة التثقيف الصحي
سلسلة مطويات لجنة التثقيف الصحي (٢٧)

بخاخات الربو وطرق استخدامها



خامساً : انزع القناع واجعل الطفل يرتاح قليلاً وأعد العملية مرة أخرى.

كيفية تنظيف الجهاز المساعد (الأيروشايمبر) ؟

- اغسل الجهاز بالماء من خلال فتحة البخاخ.
- لا تغسله من جهة القناع (ذلك قد يخرب عمل الجهاز).
- لا تستخدم الصنبور في الغسيل اغسل القناع بالماء.
- رج الجهاز للتنظيف من الداخل.
- حرك الجهاز للتخلص من الماء الزائد.
- اترك الجهاز ينشف خلال الليل (بدون مسحه بالفضة أو المنديل).
- يجب غسل الجهاز كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ملحوظة :

إن استخدام بخاخات مرض الربو لجميع أنواعها لابد أن يكون بأمر الطبيب وحت إشرافه , وذلك لتشابه أعراض مرض الربو مع أمراض رئوية أخرى.

مع خيات لجنة التثقيف الصحي
للتواصل:


هاتف: ٢٥٨٣٠٥٧ - ٢٥٨٣١٠٣

مطابع الجامعة

عن طريقها التغلب على بعض الصعوبات والحصول على نتائج أفضل وتدعى بالإنجليزية (أيروشانبر).



ما هي طريقة استخدام الأجهزة المساعدة ؟

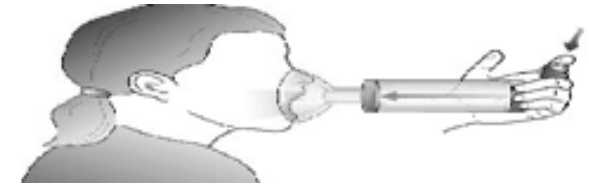

أولاً : رج عبوة البخاخ قبل الاستخدام .
ثانياً : ادخل الجزء الخاص بالفم من البخاخ داخل النهاية المطاطية من الجهاز المساعد واحكم تثبيته .
ثالثاً : ضع القناع لأنف وفم الطفل واحكم امساكه.
رابعاً : اضغط على أنبوبة البخاخ لينتقل الدواء داخل الجزء الشفاف , وانتظر ١٠ ثواني.